


在宅ケアベッド

安定した姿勢で起きあがれ、床ずれリスクにも配慮した新しい背あげが出来るベッドです。




暗いところでも見やすい白色液晶表示付き手元スイッチ

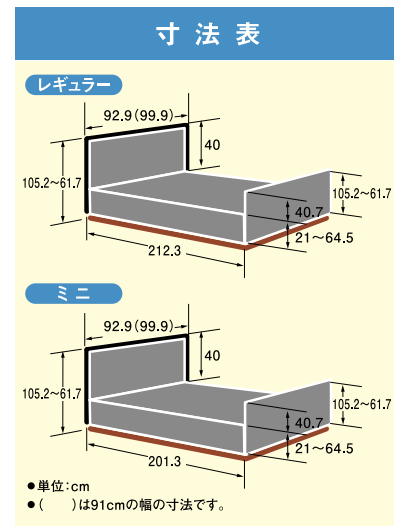

低くて安心。

超低床21cm

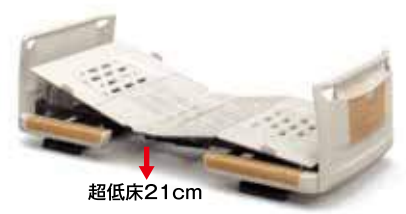

ベッドに慣れていない方にも安心の高さ。足が床につきやすいので、安心して座ることができます。

① ラクリアクションでの背あげ



① 身体がずれないように、まず膝をあげてから上体を起こしはじめます。



② すこし上体を起こしてからベッドが傾き始めます。



③ ベッドが10°傾くと傾斜がとまり、さらに上体を起します。



④ 上体を起しながら膝をさげること、骨盤の立った安定した姿勢で起きあがります。

② リラックスできて動きやすい



安定した姿勢が維持しやすいので、背もたれに頼ることが少なく、首や肩、腕が動きやすくなります。

③ 離床しやすい




ベッドの外に足を降ろしやすく、またベッドの下のスペースが広いので、立ちあがるときに十分に足を引くことができます。

④ 視界が広がる



骨盤の立った背あげ姿勢がとれ、フットボード側が低くなるため、ベッドで過ごしているときに天井方向に向かいがちだった視線が生活空間に向きやすくなります。また身体が動かしやすいので、視界も広がりやすくなります。

⑤ 介護しやすい

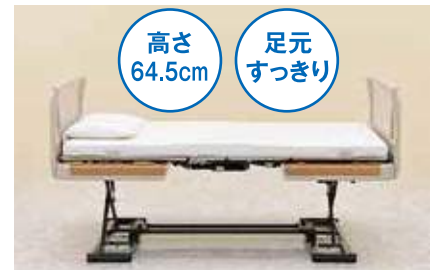

ベッドの高さは21cmから最大64.5cmまで幅広く調節可能。腰に負担がかかりにくい姿勢で介護することができます。またベッド下のスペースが広いので踏み込んで接近しやすい構造です。

楽匠 Zシリーズ 3モーションシリーズ パラマウントベッド

ラクリアモーションに加え、らくらくモーション機構がついており、
摩さつや圧迫感が少ない安定した姿勢で起きあがることができます。

TAISコード 00170-000785



レギュラー(91cm幅) 商品番号 C-071A ●型式:KQ-7331	質量 86.5 kg	ミニ(91cm幅) 商品番号 C-071B ●型式:KQ-7321	質量 86 kg
レギュラー(83cm幅) 商品番号 C-071C ●型式:KQ-7311	質量 84.5 kg	ミニ(83cm幅) 商品番号 C-071D ●型式:KQ-7301	質量 84 kg

*ゆかからボトム上面までの高さです。

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

楽匠 Zシリーズ 2モーションシリーズ パラマウントベッド

ラクリアモーションに加え、背の角度とベッドの高さが
個別に操作可能です。

TAISコード 00170-000777



レギュラー(91cm幅) 商品番号 C-081A ●型式:KQ-7231	質量 85.5 kg	ミニ(91cm幅) 商品番号 C-081B ●型式:KQ-7221	質量 85 kg
レギュラー(83cm幅) 商品番号 C-081C ●型式:KQ-7211	質量 83.5 kg	ミニ(83cm幅) 商品番号 C-081D ●型式:KQ-7201	質量 83 kg

*ゆかからボトム上面までの高さです。

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

延長フレームセット

パラマウントベッド

レギュラーのベッドを足側に14cm延長できます。



延長フレーム(91cm幅用) 商品番号 C-031E	延長マットレス(91cm幅用/厚み8cm) 商品番号 C-031B	延長マットレス(91cm幅用/厚み10cm) 商品番号 C-031G
TAISコード 00170-000793	TAISコード 00170-000563	TAISコード 00170-000564
●型式:KQ-P72L	●型式:KE-551L	●型式:KE-521LA
延長フレーム(83cm幅用) 商品番号 C-031F	延長マットレス(83cm幅用/厚み8cm) 商品番号 C-031D	延長マットレス(83cm幅用/厚み10cm) 商品番号 C-031H
TAISコード 00170-000792	TAISコード 00170-000565	TAISコード 00170-000566
●型式:KQ-P70L	●型式:KE-553L	●型式:KE-523LA

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

特殊寝台・特殊寝台付属品



らくしよ Zシリーズ

楽匠Zシリーズ専用のベッド設置式手すり。
この手すりですべての生活が大きく変わります。



アクセスポート ポール手すりセット

基本セット+
垂直ポール+
歩行用手すり




- ベッドからの立ちあがりや車椅子などへの移乗をサポートします。
- 頭側・足側・右側・左側いずれにも取り付け可能
- 方向転換しやすいグリップ形状
- グリップの高さは70・75・80cmの3段階で調節可能
- 用途に合わせて垂直ポールや歩行用手すりを取り付け可能

●基本セット アクセスポート基本セット KQ-P70G パラマウントベッド



※ベッドは基本セットに含まれません。

ベッドからの立ちあがりに使用できます。

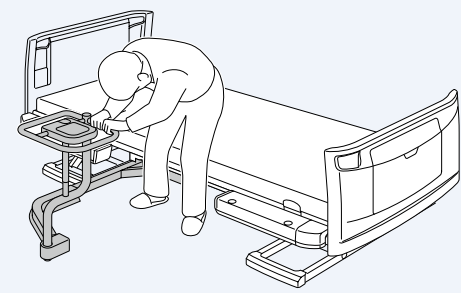

TAISコード 00170-000795

商品番号 **D-331D**
●型式:KQ-P70G


月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

●垂直ポール アクセスポート垂直ポール KQ-P70P



垂直ポール
KQ-P70P

移乗の補助具として使用できます。

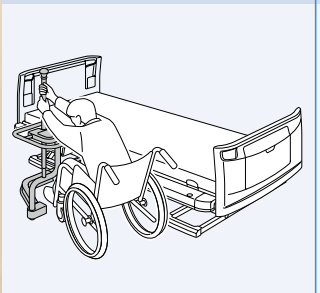

立位保持の補助具として使用できます。



TAISコード 00170-000796

商品番号 **D-331E**
●型式:KQ-P70P


月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

●歩行用手すり アクセスポート歩行用手すり KQ-P70T



歩行用手すり
KQ-P70T

歩行の補助具として使用できます。

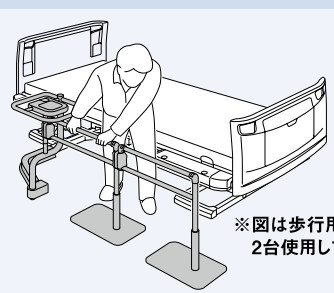

※図は歩行用手すりを2台使用しています。

TAISコード 00170-000797

商品番号 **D-331F**
●型式:KQ-P70T

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

在宅ケアベッド

独自の快適な背上げ機構に、超低床化による安全性と安心感をプラスしたパラマウントベッドの“超”低床ベッドです。

楽匠 *FeeZ*
らくしやう フィーズシリーズ

JIS T 9254
JIS 福祉用具
JQA JQ0308178

Point 1

ご利用様の安心感と就寝時の安全性をさらに高める
“超”低床、最低床高15cm

ふとんからベッドに移行する際の違和感が少なく、万一転落したときの衝撃も緩和できます。

Point 2

快適な独自の背上げ機構・らくらくモーション(3モーター)

身体のずれと圧迫感を抑えながら、安定した姿勢で起き上がることができます。


Point 3

より多くの方が操作できるように配慮した液晶付手元スイッチ


- 見やすい白色液晶パネル
暗いところでも見やすく、操作内容を絵記号と数値で表示
- メモリー機能
よく使用するポジションを記憶させ、その位置で一旦停止させることができます。
- 高さ一旦停止機能
高さを下げる時に足や周辺の物品を挟まないように、ボトムの高さが29cmで一旦停止します。再度↓ボタンを押すと、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低床高まで通常より低速で下がります。

寸法表

木製ボード

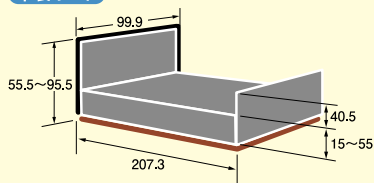

樹脂ボード

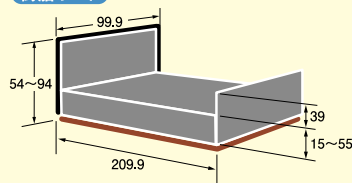

質量


96.5 kg

3モーター

質量

95.0 kg

2モーター

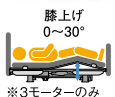

楽匠 FeeZシリーズ 3モーター 木製ボードレギュラー(91cm幅) パラマウントベッド

TAISコード 00170-000893 ●型式:KQ-7833 商品番号 C-090A

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

楽匠 FeeZシリーズ 2モーター 木製ボードレギュラー(91cm幅) パラマウントベッド

TAISコード 00170-000892 ●型式:KQ-7733 商品番号 C-091A

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量

92.0 kg

3モーター

質量

90.5 kg

2モーター



楽匠 FeeZシリーズ 3モーター 樹脂木目ボードレギュラー(91cm幅) パラマウントベッド

TAISコード 00170-000919 ●型式:KQ-7831 商品番号 C-090B


月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

楽匠 FeeZシリーズ 2モーター 樹脂木目ボードレギュラー(91cm幅) パラマウントベッド

TAISコード 00170-000918 ●型式:KQ-7731 商品番号 C-091B

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

在宅ケアベッド 床からベッドまでの高さが20cmの超低床ベッドです。

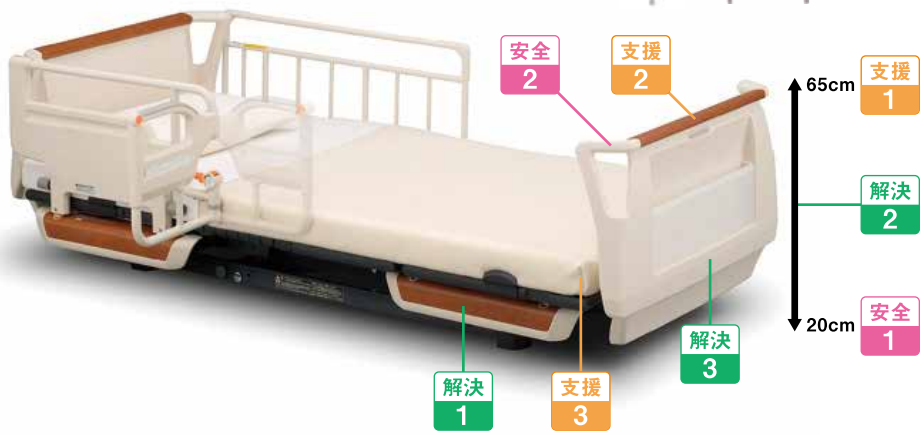

寸法表

レギュラー
<p>93(100) 39 104~59 210 39 104~59 20~65</p>
ミニ
<p>93(100) 39 104~59 199 39 104~59 20~65</p>

●単位:cm
●()は91cmの幅の寸法です。

楽匠Sシリーズは、介護に必要な3つの「S(安全・解決・支援)」をテーマにしたベッドです。

<p>Safety 安全</p> <p>Solution 解決</p> <p>Support 支援</p>	<h3>超低床20cm</h3> <p>安全 1</p> <ul style="list-style-type: none"> 床からベッドのボトム面までの高さを超低床の20cmにすることで、万一ベッドから落ちてしまった時の安全性を高めました。 小柄な方でも、しっかり床に足がつかます。 	<h3>セーフティーラウンドボード</h3> <p>安全 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ベッドとボードの四隅を内側にまげこんだボードラウンド形状により、柵とボードの隙間に身体の一部が挟まりにくいデザインです。 	<h3>手元スイッチ</h3> <p>安全 3</p> <ul style="list-style-type: none"> 意図しない操作を防ぐために、手元スイッチの前面にオン/オフ切替ボタンを設定。 操作しやすいようにボタンを大きく、押しやすい位置に設計しました。
	<h3>格納式オプション受け</h3> <p>解決 1</p> <ul style="list-style-type: none"> サイドレールやスイングアーム介助バー等を使用しない場合、オプション受けの格納が可能です。 車いすなどのアプローチにも便利です。 	<h3>垂直ハイロー機構</h3> <p>解決 2</p> <ul style="list-style-type: none"> GXフレーム構造により高さ調整時に生じていたスイング動作を無くし、垂直な動作が可能になりました。 	<h3>マガジンラック/収納ポケット</h3> <p>解決 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ヘッドボードの内側には小物入れ、フットボード外側にマガジンラックを用意しました。 ベッド周りをすっきりとご利用いただけます。
	<h3>最高床高65cm</h3> <p>支援 1</p> <ul style="list-style-type: none"> 超低床から最高床高65cmまで調整が可能になりました。身長が高い方でも腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。 	<h3>歩行グリッパ</h3> <p>支援 2</p> <ul style="list-style-type: none"> セーフティーラウンドボードの上部に歩行グリッパを採用。つかまりやすい手すりとしてお使いいただけます。ベッド周辺をつたい歩きする時に安心です。 	<h3>足先の角度切替機能</h3> <p>支援 3</p> <ul style="list-style-type: none"> 膝を上げた際の足先角度が山なりと水平に切替ができます。ご利用になる方の用途に合わせてご利用いただけます。

上質なゆとりをお届けする100cm幅。



楽匠Sシリーズ らくらくモーション 木製ボード レギュラー(100cm幅) バラマウントベッド

TAISコード	00170-000679	商品番号	C-006B	質量	99.0 kg
			●型式:KQ-9652		
月額レンタル料金		ご利用者負担額			
		1割負担	2割負担		

楽匠Sシリーズ 2モーター 木製ボード レギュラー(100cm幅) バラマウントベッド

TAISコード	00170-000678	商品番号	C-006A	質量	97.5 kg
			●型式:KQ-9252		
月額レンタル料金		ご利用者負担額			
		1割負担	2割負担		



※数量限定

楽匠 Sシリーズ らくらくモーション [樹脂木目] パラマウントベッド

TAISコード 00170-000517

レギュラー (91cm幅)

商品番号 **C-007A**

●型式:KQ-9631

質量 **94.0**
kg

ミニ (91cm幅)

商品番号 **C-007B**

●型式:KQ-9621

質量 **93.0**
kg

レギュラー (83cm幅)

商品番号 **C-007C**

●型式:KQ-9611

質量 **92.0**
kg

ミニ (83cm幅)

商品番号 **C-007D**


●型式:KQ-9601

質量 **91.0**
kg

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

楽匠 Sシリーズ 3モーター [樹脂木目] パラマウントベッド

TAISコード 00170-000518

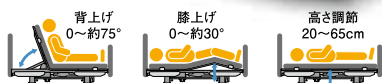

※数量限定

レギュラー (91cm幅)

商品番号 **C-011A**

●型式:KQ-9331

質量 **94.0**
kg

ミニ (91cm幅)

商品番号 **C-011B**

●型式:KQ-9321

質量 **93.0**
kg

レギュラー (83cm幅)

商品番号 **C-011C**

●型式:KQ-9311

質量 **92.0**
kg

ミニ (83cm幅)

商品番号 **C-011D**

●型式:KQ-9301

質量 **91.0**
kg

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

楽匠 Sシリーズ 2モーター [樹脂木目] パラマウントベッド

TAISコード 00170-000519



※数量限定

レギュラー (91cm幅)

商品番号 **C-021A**

●型式:KQ-9231

質量 **92.5**
kg

ミニ (91cm幅)

商品番号 **C-021B**

●型式:KQ-9221

質量 **91.5**
kg

レギュラー (83cm幅)

商品番号 **C-021C**

●型式:KQ-9211

質量 **90.5**
kg

ミニ (83cm幅)

商品番号 **C-021D**

●型式:KQ-9201

質量 **89.5**
kg

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

レギュラーのベッドを足側に14cm延長できます。



※数量限定

延長フレームセット

パラマウントベッド

延長フレーム (91cm幅用)

商品番号 **C-031A**

TAISコード 00170-000526

●型式:KQ-P92L

延長マットレス (91cm幅用/厚み8cm)

商品番号 **C-031B**

TAISコード 00170-000563

●型式:KE-551L

延長マットレス (91cm幅用/厚み10cm)

商品番号 **C-031G**

TAISコード 00170-000564

●型式:KE-521LA

延長フレーム (83cm幅用)

商品番号 **C-031C**

TAISコード 00170-000525

●型式:KQ-P90L

延長マットレス (83cm幅用/厚み8cm)

商品番号 **C-031D**

TAISコード 00170-000565

●型式:KE-553L

延長マットレス (83cm幅用/厚み10cm)

商品番号 **C-031H**

TAISコード 00170-000566

●型式:KE-523LA



月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

在宅ケアベッド 付属品 楽匠シリーズ専用

スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

より便利に、より安全に使える介助バー
固定ハンドルを回すだけで固定・解除が可能

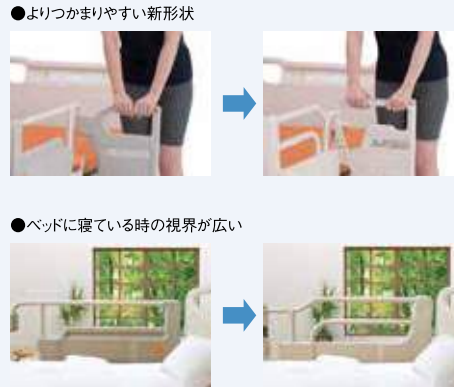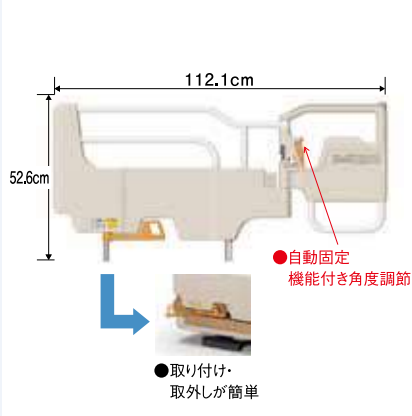

TAISコード 00170-000898

商品番号 **C-201T**
●型式:KS-098A

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

サイドグリップ

パラマウントベッド

開閉部の無いコンパクトなベッド用すり
固定ハンドルを回すだけで固定・解除が可能



TAISコード 00170-000897

商品番号 **C-201U**
●型式:KS-030A

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

Sシリーズ専用 パラマウントベッド ハイトスペーサー (4コセット)

TAISコード 00170-000561

商品番号 **C-201F** ●型式:KQ-P90H



※ベッドの高さが6.5cm高くなります。

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

Sシリーズ専用 パラマウントベッド キャスター (4コセット)

TAISコード 00170-000560

商品番号 **C-201E** ●型式:KQ-P90C



※ベッドの高さは変わりません。

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

Sシリーズ専用 パラマウントベッド キャスター付ハイトスペーサー (4コセット)

TAISコード 00170-000608

商品番号 **C-201G** ●型式:KQ-P90CH



※ベッドの高さが6.5cm高くなります。

月極レンタル料金	
ご利用者負担額	
1割負担	2割負担

スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

TAISコード 00170-000551

商品番号 **C-201C**
●型式:KS-096A



色:アイボリー

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担


※数量限定

ベッドサイドレール(1本)

パラマウントベッド

TAISコード 00170-000527

商品番号 **C-201A**
●型式:KS-161Q

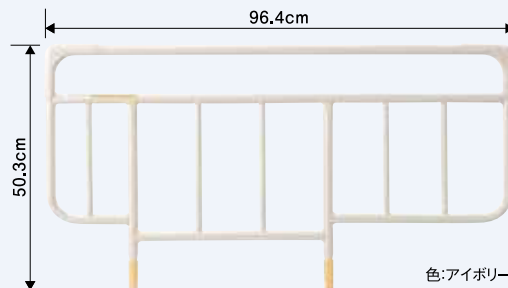

色:アイボリー


月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ベッドサイドレール(1本)

パラマウントベッド

TAISコード 00170-000752

商品番号 **C-201H**
●型式:KS-191Q

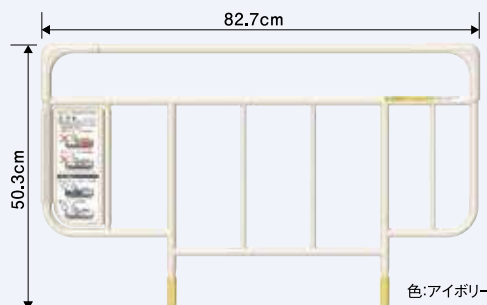

色:アイボリー


月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ベッドサイドレール(1本)介助バー組合せ用

パラマウントベッド

TAISコード 00170-000537

商品番号 **C-201D**
●型式:KS-151Q

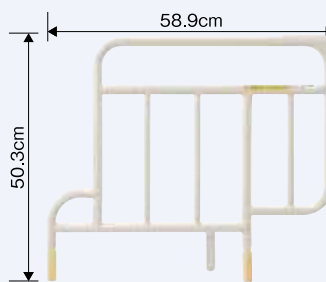

色:アイボリー

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

Zシリーズ専用キャスター4コセット

パラマウントベッド

TAISコード 00170-000794

商品番号 **C-201M**
●型式:KQ-P70C



※ベッドの高さが3cm高くなります。

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ベッドサイドレール(1本)ハイタイプ

パラマウントベッド

TAISコード 00170-000529

商品番号 **C-201B**
●型式:KS-171Q



色:アイボリー

※15cm以上厚みのあるマットレスを使用する場合にお使いください。

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

和夢(なごむ)シリーズ 彩(さい)

暮らしを彩るベッドであってほしい。そんな想いを形にしました。



JIS T 9254 : 2009



GOOD DESIGN AWARD
2015年度受賞


SEAHONENCE

なごむ さい

『和夢 彩』は、ご利用者の方をはじめ、多くの皆様の声を大切に「快適な在宅介護」「腰痛予防」「認知症対策」を主眼に開発いたしました。

寸法表

ショート レギュラー

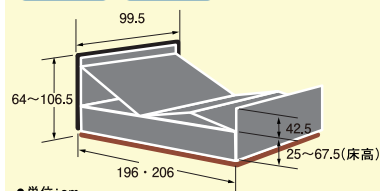

●単位:cm

- 本体 / スチール製、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ
- ヘッド・フットボード / 樹脂製(木目シート貼り)

● 業界初!!ヘッドレスト機能 / 誤嚥のリスクを低減



背上げ角度 30° ヘッドレスト機能未使用時と使用時

業界初のヘッドレスト機能により、頭部だけを30°傾けることで、顎を少し引き、前かがみの姿勢を作ることができ、誤嚥リスクを低減させることができます。ヘッドレストご使用時には、視界も広がり、これから口にする食物等を目視で確認することもできます。また、口腔ケアも格段に行いやすくなります。


【首の角度を調整し、誤嚥の発生を防ぐ】

嚥下障害がある方は、体の角度を調整する(上半身を倒す)ことにより、食べ物を送り込みやすくなります。また首の角度を調整することで誤嚥(ごえん)が起こりにくくなります。

今回、「彩」というベッドは在宅で介護しやすく、少しでも誤嚥を予防できるよう工夫がされています。その工夫点は、①上半身の角度計設置②首の位置変更装置③上半身と下半身の同時挙上が挙げられます。人は食事をする時にリラックスして座っています。ベッド上でも安楽でリラックスした状態にすることで最大の嚥下機能が発揮できるといわれています。また、唾液は成人で1日約1.5L出ており、夜間でも無意識に嚥下しています。嚥下機能が低下している方は、夜間に唾液が気管に流れ込んでいる方も多いため、

そのため、「彩」は首が反り返らないよう工夫がされていますのでご利用していただければと考えています。

● 垂直昇降・床高 67.5cm ベッド設置空間のコンパクト化・腰痛予防

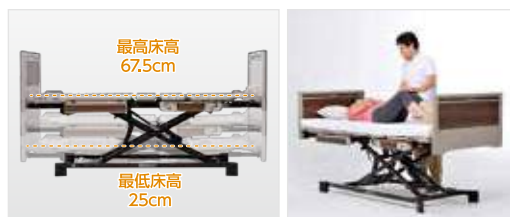

● 手元スイッチロック機能 誤操作を防止 (認知症対策)



● 安全に背上げができるように 配慮した角度計



3モーター 2モーター



和夢シリーズ 彩 3モーター ショート・レギュラー (ボトム幅90cm)

シーホネンス

TAISコード 00167-000195

商品番号 **C-010A**
●型式:NX-1

質量 **88.0**
kg

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

和夢シリーズ 彩 2モーター ショート・レギュラー (ボトム幅90cm)

シーホネンス

TAISコード 00167-000197

商品番号 **C-009A**
●型式:NX-2

質量 **87.5**
kg

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

和夢(なごむ)シリーズ 凜(りん)



JIS T 9254 : 2009




KEPROCORE®

その名に相応しい凜とした
風格あるフォルム。
生活の中で静かに、そして優しく
使用する人を支えます。

寸法表

セミショート

(オプション受け使用時) 99.6
(オプション受け収納時) 93

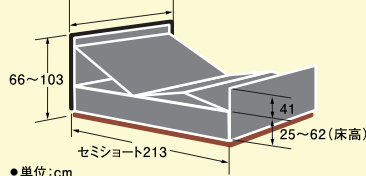

●単位:cm


- 本体/スチール製/抗菌剤入り粉体塗装仕上げ
- ヘッド・フットボード/樹脂製(木目シート貼り)

● 格納式オプション受け



未使用時にはボトム下部に格納することができます。格納することで、ベッドからの突出がなくなるためベッドの乗り降りや車いすのアプローチがより簡単に行えます。

● オプション受けが片側に5カ所

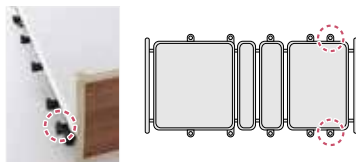

セミショートサイズベッドには片側5カ所に格納式オプション受けを設けています。専用サイドレール [K-172足側専用] をご利用いただけます。


● セミショート専用サイドレール



専用サイドレールの [K-172] と回転式アーム介助バー [K-40R] の組み合わせで有効乗り降り間口が広く取れます。(有効乗り降り間口63cm)

● 身体の前ズレを最小限に抑えるケアモーション

K-720A 専用機能

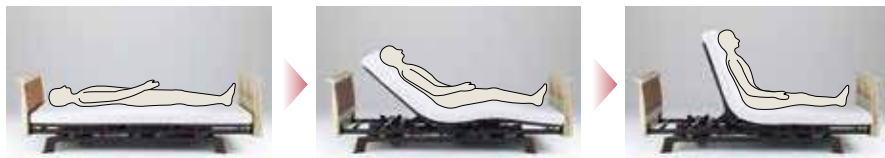

背上げの際、背上げと同時に足上げを開始。足上げが約15°になると自動で足上げ動作に移行します。そのため自然な座位を保ちながら、身体の前ズレを最小限に抑えます。背上げが最大70°になると足はフラットになるため、腹圧も軽減できます。

● スイングバック機能



背上げの支点を後方にスライドさせながら背上げをする機能です。身体への圧迫感や負担を軽減し、前ズレを抑え自然な座位を保てます。

和夢シリーズ 凜 3モーター セミショート(ボトム幅89cm)

シーホネクス

TAISコード 00167-000155

商品番号 **C-008A**

質量 **78.5** kg

●型式:K-730

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

和夢シリーズ 凜 2モーター セミショート(ボトム幅89cm)

シーホネクス

TAISコード 00167-000153

商品番号 **C-008B**

質量 **77.5** kg

●型式:K-720A(ケアモーションタイプ)

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担




片側に5カ所のオプション受け

和夢(なごむ)シリーズ 彩/凜(さいりん) 専用オプション

中央差し可能
ベッドサイドレール シーホネス

TAISコード 00167-000152

商品番号 **C-221B** ●K-170SS



長さ99.5cm
高さ(ボトム面より)彩:39.5cm、凜:41cm

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

中央差し可能
ベッドサイドレール シーホネス

TAISコード 00167-000110

商品番号 **C-221I** ●K-170S



長さ89.5cm
高さ(ボトム面より)彩:39.5cm

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

中央差し可能
ベッドサイドレール シーホネス

TAISコード 00167-000183

商品番号 **C-221C** ●K-173




長さ84cm
高さ(ボトム面より)彩:39.5cm、凜:41cm

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

中央差し可能
ベッドサイドレール シーホネス

TAISコード 00167-000199

商品番号 **C-221J** ●K-173S



長さ72cm
高さ(ボトム面より)39.5cm

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ベッドサイドレール シーホネス

TAISコード 00167-000233

商品番号 **C-221M** ●K-195RX



長さ52cm
高さ(ボトム面より)彩:39.5cm
回転式アーム介助バー 脚側専用サイドレール

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ベッドサイドレール シーホネス

TAISコード 00167-000232

商品番号 **C-221N** ●K-195SX




長さ42cm
高さ(ボトム面より)彩:39.5cm
回転式アーム介助バー 脚側専用サイドレール

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

回転式アーム 介助バー シーホネス

TAISコード 00167-000226

商品番号 **C-221H** ●K-47R




長さ119cm
高さ(ボトム面より)彩:39.5cm
アーム部の角度は15°刻み

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

回転式アーム 介助バー シーホネス

TAISコード 00167-000138

商品番号 **C-221A** ●K-40R




長さ119.6cm
高さ(ボトム面より)凜:41cm
アーム部の角度は15°刻み

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

ベッドサイドレール シーホネス

TAISコード 00167-000151

商品番号 **C-221D** ●K-172



長さ52cm
高さ(ボトム面より)41cm
凜セミショートサイズ専用

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

彩専用キャスター (4個セット) シーホネス

TAISコード 00167-000209

商品番号 **C-221M** ●K-129



キャスター径:φ7.5cm
取付け時ベッド高さ(ボトム面)28cm
2個ロック付き

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

凜専用キャスター (4個セット) シーホネス

TAISコード 00167-000134

商品番号 **C-221E** ●K-127



キャスター径:φ10cm
取付け時ベッド高さ(ボトム面)28cm
2個ロック付き

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担




※サイドレールの組合せや差し込み方向など詳細は取り扱い説明書をご確認ください。



和夢(なごむ)シリーズ 彩/凜(さいりん) ベッドサイドレール組合せ

JIS認証対象

※サイドレールの組合せや差し込み方向など詳細は取り扱い説明書をご確認ください。

彩・レギュラーサイズ	あたま側				あし側
彩・ショートサイズ	あたま側				あし側
凜・セミショートサイズ	あたま側				あし側