

# 移動用リフト

移動はいきいき生活の基本。一日に何度もすることだから、より安全に快適に。介護の負担を少なくしましょう。

質量  
**62.0**  
kg



コンパクトサイズ



らくらく段差解消

## リーチ ショートタイプ (昇降範囲:8~40cm) モルテン

さまざまな玄関での段差を解消する据え置き型コンパクトリフト。ストレート・L字どちらでも対応できます。

TAISコード 00054-000170

商品番号 **L-570A**

- ◆スロープが置けない狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ(車いす約1台分)。
- ◆ペダルを踏むだけの簡単操作(電源不要)。

- 型式:MREALT
- サイズ(cm):  
長さ110×幅100・107・114(3段階調整)×全高111.5~172
- テーブルサイズ(cm):長さ110×幅76・83・90(3段階調整)
- 耐荷重(kg):150

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量  
**33.0**  
kg



## 段差解消機アルコー6000型 星光医療器

設置工事不要で気軽に置けます。座面高さ44cm~86cmまで昇降し、玄関のあがりかまちで便利に使うことができる段差解消機です。

TAISコード 00125-000056

商品番号 **L-544A**



別座面高さの  
設定が可能です

- 本体外寸(アジャスター含)  
/560×698×800mm
- コード長さ/3,700mm
- 最低座高/440mm
- 最高座高/860mm
- 上下ストローク/420mm
- アジャスター調幅/25mm
- 座マット寸/400×400mm  
厚み60mm
- 定格消費電力/100W



月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量  
**48.0**  
kg



折りたたみ時  
奥行 25cm



昇降・  
回転のイメージ

## 段差解消機 NEWおでかけ宣言 コムラ製作所

お出かけを安全・快適にサポートする段差解消機です。安全な上限、下限リミット機能付。

TAISコード 00088-000019

商品番号 **L-543A**

- 型式:DSNO-A
- サイズ(cm):全幅49×全高113×奥行58~70 ●電源(V):100
- 最大荷重(kg):100 ●上限リミット範囲:620~870mm
- 下限リミット範囲:290~470mm
- 座面高:290~870mm ●座部回転角度:左右各90°

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量

75.0  
kg




### 屋内用電動昇降機 UD-420 (昇降範囲:4~50cm) いうら

ブラウンを基調に、インテリアイメージを損なわないおしゃれなフォルム。コンパクトサイズで、玄関などのせまいスペースにも設置できます。

TAISコード 00084-000072

商品番号 **L-561C**

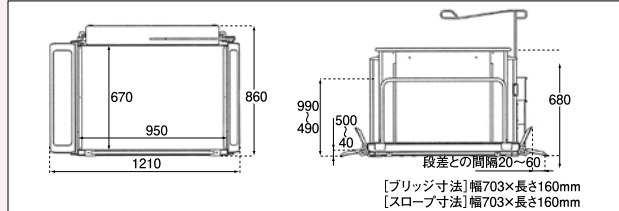

- 型式:UD-420 ●全長(スロープを下げた状態)(cm):121
- 全幅(cm):86 ●全高(cm):68~99 ●耐荷量(kg):120

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量

75.0  
kg




### 車いす用電動昇降機(ストレートタイプ) UD-320CS (昇降範囲:5.5~65cm) いうら

屋内と屋外との段差をなくす車いす用昇降機。住宅状況や介護方法に合わせて利用できます。

TAISコード 00084-000093

商品番号 **L-562A**

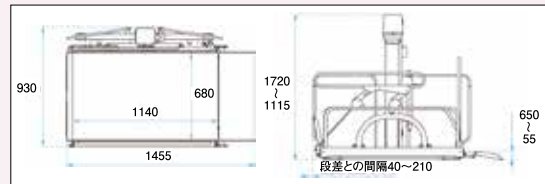

- 型式:UD-320CS
- サイズ(cm):全長(スロープを下げた状態)145.5×全幅93×全高111.5~172
- 電源(V):100 ●最大荷重(kg):150・1人乗り用

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量

85.0  
kg




### 車いす用電動昇降機(ストレートタイプ) UD-310S (昇降範囲:6~65cm) いうら

屋内と屋外との段差をなくす車いす用昇降機。住宅状況や介護方法に合わせて利用できます。

TAISコード 00084-000067

商品番号 **L-561A**

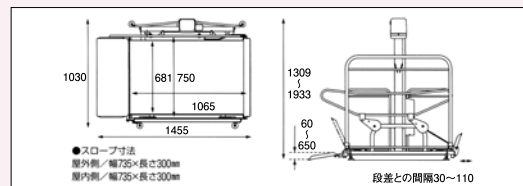

- 型式:UD-310S
- サイズ(cm):全幅103×奥行145.5×全高130.9~193.3
- 電源(V):100 ●最大荷重(kg):150・1人乗り用

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

※数量限定

質量

79.0  
kg




### 車いす用電動昇降機(L字タイプ) UD-320CL (昇降範囲:5.5~65cm)

いうら

TAISコード 00084-000094

商品番号 **L-562B**

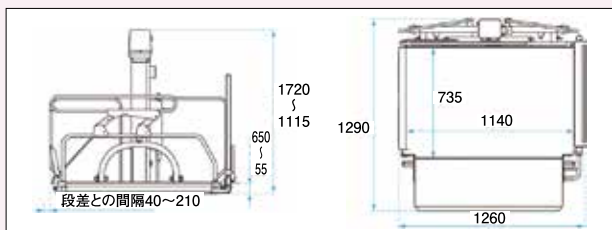

- 型式:UD-320CL
- サイズ(cm):全長(ブリッジを立てた状態)126×全幅(スロープを下げた状態)129××全高111.5~172
- 電源(V):100 ●最大荷重(kg):150・1人乗り用

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量

118.0  
kg



### 車いす用電動昇降機 UD-650 (昇降範囲:6~82cm)

いうら

ブリッジとレバーの組み替えだけで、直進乗り込みにもL字乗り込みにも対応できます。電動車いすはもちろん、介護者も同乗可能。


TAISコード 00084-000082

商品番号 **L-561D**


L字乗り込み



[ブリッジ寸法] 幅730×長さ300mm  
[スロープ寸法] 幅1,050×長さ300mm

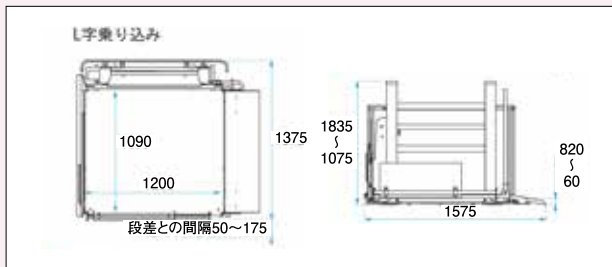

直進乗り込み

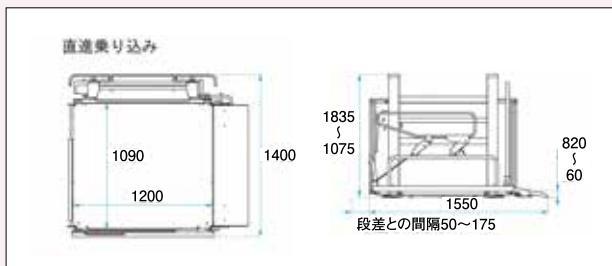

直進乗り込み



- 型式:UD-650
- 全長(スロープを下げた状態)(cm):直進154.7 L字157.5
- 全幅(cm):直進140 L字137.2
- 全高(cm):107.4~183.4
- 耐荷量(kg):180・2人乗り可

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担



質量  
**42.0**  
kg



座面高さは1.5~61cmまで  
高さ調節可能。  
アームレストは跳ね上げできる  
ので、ベッド、車いすへの移乗  
にも利用できます。



### 電動昇降座いす 独立宣言 ローザ コムラ製作所

座板わずか1.5cmで床から乗り込みやすく、  
腰やひざに負担をかけず立ち上がれる。

TAISコード 00088-000022

商品番号 **L-542A**

- 型式:DSRS-C
- サイズ(cm):全幅55×全長81×全高97.5
- 電源(V):AV100V
- 最大荷重(kg):80
- 座面高さ(cm):1.5~61
- 昇降速度:14mm/sec
- 定格消費電力:MAX80W

床面1.5cmの低さから  
座面61cmの高さまで



月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量  
**45.0**  
kg



### 電動昇降座いす リクライニング コムラ製作所

座面の昇降に加え電動リクライニング、  
チルト機能がついた独立宣言高級タイプ。

TAISコード 00088-000015

商品番号 **L-543B**

- 型式:DSREC
- サイズ(cm):全高95.5×全幅66×全長101.5
- 座面高さ(cm):16~57.5
- 最大荷重(kg):100

電動リクライニング機能  
背もたれが  
うしろに傾斜。



電動チルト機能  
背もたれと座板が  
一緒に傾斜。



月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量  
**46.0**  
kg



### 電動昇降座いす ツイスト コムラ製作所

くつろぎ姿勢のままクルリ。  
座面70°回転でイスを移動せずOK。

TAISコード 00088-000014

商品番号 **L-541B**

- 型式:DSTRA
- 電源(V):AV100V(コード長3m)
- 最大荷重(kg):80
- 座面高さ(cm):16~57.5
- サイズ(cm):全高94×全幅64.5×全長82.5

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

移動用リフト

質量  
**58.0**  
kg



## 電動昇降座いす 暖らん コムラ製作所

座面の回転、昇降、リクライニングに加え、こたつへの出入もラクに出来る座面スライド機能のついた多機能座いす。

TAISコード 00088-000021 商品番号 **L-543C**

- 型式:DSDAR
- サイズ(cm):全高97×全幅64~58×全長99.5~116
- 最大許容荷重(kg):80
- 座面高さ(cm):16~57



月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量  
**36.0**  
kg



## 電動昇降座いす エコライト コムラ製作所

床や畳から腰・ひざに負担をかけずに立ち上がれます。

TAISコード 00088-000012 商品番号 **L-541A**



- 型式:DSERA ●電源(V):AV100V(コード長3m) ●最大荷重(kg):100
- 座面高さ(cm):16~57.5 ●サイズ(cm):全高84×全幅62×全長78

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量  
**35.0**  
kg



## 電動リフトアップチェア リラックスチェア コムラ製作所

すわり心地がよく、立ちやすい水平昇降と傾斜昇降の切り替えが可能な、家具調のいすです。

TAISコード 00088-000018 商品番号 **L-543D**

- 型式:ECRC
- 使用時サイズ(cm):全高98×全幅59×奥行81
- 最大許容荷重(kg):100
- ストローク(cm):18(座面高さ(cm):35~53(水平時):35~46(傾斜時))
- リクライニング角度:110~135°

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量  
**37.0**  
kg



使用例

※詳しい使い方は「スカイリフト」検索にて動画でわかりやすくご紹介しています。

## 介護リフト スカイリフト アイソネックス

介護者の負担を大幅に減らします。ベッドから車いす、トイレなどへの移乗を簡単にする電動リフト。

TAISコード 00149-000006

商品番号 **L-565C**

下肢筋力の低下や麻痺で歩行や立ち上がり動作の困難な高齢者の方や障害を持った方のベッドやトイレ、車いすの移乗時等、様々な場所で活躍します。電動で稼動するので、介護する方の身体的負担を大きく軽減します。

さらに立位訓練にも使えるので、ご利用者さまの心身機能の活性化にも役立ちます。

●型式:SL-2009U

●重量:37kg ●サイズ(cm)幅:50×高さ:135.7×奥行:96

※「単相100V」もしくは「充電(単相100V)」でご利用できます。

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

※スリングシートは購入になります

### 使用方法



電源スイッチを入れ、充電状況を確認し、ハンドスイッチの昇降ボタンを押してアームが上下することを確認します。

胸パットの高さを使用者のみぞおちに合わせ、ベッドに座った使用者に近寄せます。

足台に両脚を乗せ、ひざパットの位置を合わせ、必要に応じてひざベルトでひざを固定します。

使用者の腰にエアスリングを当て、左右の胸パットのフックにエアスリングの脇ループを緩みのないようにきつめにかけます。

キャスターをロックしてから片手で使用者の背中を軽くささえながら、片方の手でハンドスイッチの上昇ボタンを押して立ち上げます。

完全に立ち上がった後キャスターのロックを解除して誘導します。

質量  
**20.0**  
kg



## 移乗器 らくらく移乗車いす イデアシステム

腰を上げるだけでらくらく移乗車いすとしても使用でき、ベッドから食卓やトイレへ容易に移動できる移乗器です。


TAISコード 01239-000007

商品番号 **L-565D**

移乗時のご利用者さまを抱きかかえて持ち上げる動作が軽減され、介護者の腰痛予防ができます。

また、ご利用者さまの転倒防止や、自立支援等に役立ちます。

### ●仕様

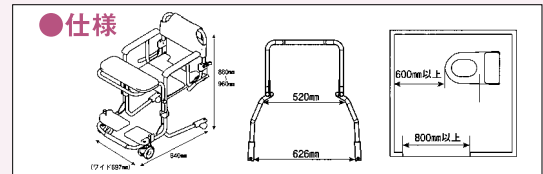

寸法	幅697mm×奥行840×高さ880～960mm(乗助さんIIワイド)
重量	20kg(本体16.5kg/座面ユニット3.5kg)
最大使用者体重	100kg
使用対象者	自力もしくは補助があれば、座位姿勢、及び立ち上がりができる方
座面高	480mm～560mm(5段階調整)
有効座面幅	410mm
対応ベッド・トイレ高さ	510mm以下
対応ベッドベースフレーム高さ	75mm以上
対応トイレスペース	開口 800mm以上 / 便器と前面壁の間隔600mm以上
キャスター径	前輪100mm / 後輪50mm

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

### ●移乗のしかた



端座位のご利用者さまにフレームを差し込みます。

背面に座面ユニットを取り付けます。

ご利用者さまの腰を上げ、レバーで座面を出します。

そのまま腰を降ろせば移乗完了。


質量  
**38.0**  
kg



## 床走行式 電動介護リフト KQ-781 パラマウントベッド

剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製。  
コードレス(充電式)で使いやすい電動介護リフトです。  
ハンドルの高さで支柱の高さが調節可能。

TAISコード 00170-000695 商品番号 **L-565B**

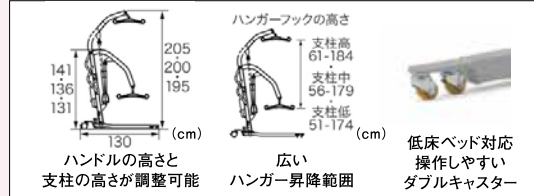

●型式:KQ-781 ●最大荷重(kg):205

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

※スリングシートは購入になります

質量  
**36.0**  
kg



操作が簡単  
安全機構付きの操作部分




万一のときに動作を停止する緊急停止ボタン

バッテリーの残量がひとめでわかる液晶表示付きのバッテリーインジケーター

## 床走行式 電動介護リフト KQ-771 パラマウントベッド

ご自分でベッドから乗り降りができない方のための電動介護リフト。  
在宅ケアベッドの全機種でお使いになれます。

TAISコード 00170-000377 商品番号 **L-565A**

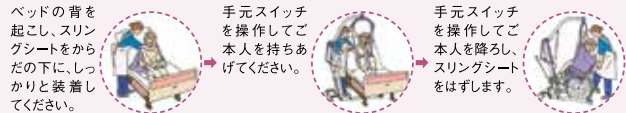

●型式:KQ-771 ●最大荷重(kg):120

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

※数量限定

※スリングシートは購入になります

質量  
**24.0**  
kg



使用例

## 床走行式 電動介護リフト リコライト Liko

140kgまで吊れる設置工事不要の床走行リフト。  
ベッドから車いす、トイレ、浴室等への移乗に最適

TAISコード 00445-000008 商品番号 **L-565E**

床走行タイプなので、ご利用者さまの居場所まで簡単にリフトを移動できます。  
専用のスリングを使うことで、お風呂での使用や床からの移乗にもご使用できます。

●重量:24kg ●長さ:1110mm ●幅:655mm ●高さ:840mm  
※「単相100V」もしくは「充電(単相100V)」でご利用できます。

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

※数量限定

※スリングシートは購入になります



質量  
**47.0**  
kg  
セット一式



## ミクニ マイティーエースⅡベッドセットZ (超低床ベッド対応) ミクニ

超低床ベッドでご利用いただけるように、ベッドサイドのフレームを極限まで低くした移乗介助リフトです。  
ベッドから車いすやポータブルトイレなどへ移乗するときに使用します。

TAISコード 00139-000029 商品番号 **L-566B**

### ●特長

- ・超低床ベッドの昇降機構に干渉しない、サイドフレームを採用しています。
- ・床や壁に穴を開ける等の工事を必要としない組み立て式です。
- ・L型(安定)プレートにベッドの重みをかけることによって、リフト使用時の不安定感をなくしました。

### ●型式:ACE-MBDW

- サイズ(cm):全長130×全幅(L型プレート含む)約184.5×全高205
- 昇降ストローク(mm):1600 ●最大吊り重量(kg):90
- ハンガー可動域:360°

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

質量  
**47.0**  
kg  
セット一式



## ミクニ マイティーエースⅡベッドセットS (楽匠Sシリーズ対応) ミクニ

超低床ベッド対応。床や壁に穴空け等の工事を必要としない組み立て式リフトです。

TAISコード 00139-000046 商品番号 **L-566A**




### ●型式:ACE-MBDS

- サイズ(cm):全長130×全幅(L型プレート含む)約172×全高205
- 昇降ストローク(mm):1600
- 最大吊り重量(kg):90 ●ハンガー可動域:360°

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担

※スリングシートは購入になります

質量  
**20.0**  
kg

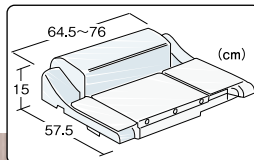

## バスリフト TOTO

電動でシートが上下。  
浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

TAISコード 00187-000111 商品番号 **L-555A**

### 特徴

- 浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。電動でシート部分が昇降するため、入浴介助の負担も軽減します。
- 本体は、浴槽リムに載せて内側に引っ張るだけなので、カンタンに取り付けられます。
- シートは着脱できますので、ご家族の入浴にも差し支えありません。

### 入浴方法



●型式:EWB101N ●電源(V):バッテリー DC12V ●最大荷重(kg):35~100

月極レンタル料金	ご利用者負担額	
	1割負担	2割負担